

Réaliser un test Embark

Commander l'écouvillon

Rendez vous sur la page de commande :

<https://shop.embarkvet.com/products/embark-for-breeders-dog-dna-test-kit>



CYBER MONDAY SALE GOING ON NOW



Embark for Breeders Dog DNA Test Kit

~~\$149~~ **\$129 Sale**

Or 3 interest-free payments of \$43 with [affirm](#). [Learn More](#)

Quantity: **Add to cart**

Cyber Monday Sale:

- 1 Kit: \$129 per kit (save \$20)
- 2-19 Kits: \$119 per kit (save \$30)
- 20+ Kits: \$115 per kit (save \$34)

Find out why thousands of breeders have trusted Embark to help manage their breeding program, from improving genetic health and diversity to screening for disease mutations, understanding coat traits, and more.

An Embark for Breeders dog DNA test kit provides breed-relevant disease screening for your purebred dogs, insights on their health, traits (including coat color, body size and more), Genetic inbreeding coefficient and results for nearly all genetic mutation tests recommended by national breed clubs are included in every kit. Our test results are accepted by the Orthopedic Foundation for Animals (OFA) for all conditions where OFA has an established DNA registry.

Product ships free in the continental U.S. Most packages arrive within 3-5 business days. Expedited shipping options available. Return shipping of swabs included.

Cliquez sur « Add to cart »

Suivez la procédure de paiement classique

Votre Kit de prélèvement peut mettre plusieurs semaines à arriver

Créez le profil de votre chien

Rendez vous sur votre compte client Embark : <https://my.embarkvet.com/members> et créez le profil de votre chien.

Do More

Get your whole pack involved or give someone the gift of discovery with Embark.

ACTIVATE KIT


ADD A DOG

ORDER A KIT

ajouter un chien

HELP CENTER

EMBARK WEBSITE

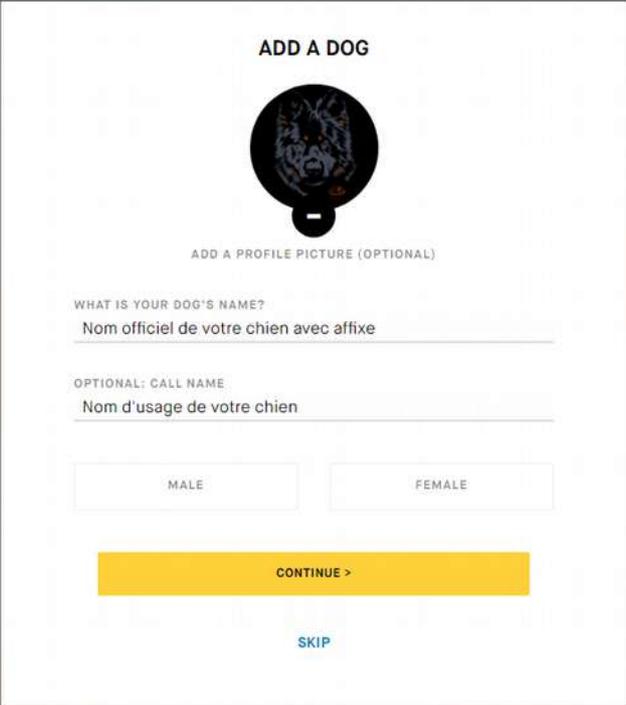

ADD A DOG

ADD A PROFILE PICTURE (OPTIONAL)

WHAT IS YOUR DOG'S NAME?
Nom officiel de votre chien avec affixe

OPTIONAL: CALL NAME
Nom d'usage de votre chien

MALE FEMALE

CONTINUE >

SKIP

Renseignez les informations de votre choix.

COMPLETE PROFILE



HIS STORY
Tell us something fun or unique about Nom d'usage de votre chien

Racontez ici ce que vous souhaitez au sujet de votre chien

58 / 500 characters

IS NOM D'USAGE DE VOTRE CHIEN ALREADY NEUTERED OR EXPECTED TO BE NEUTERED?

NOT NEUTERED NEUTERED

BREED

German Shepherd Dog

Don't see the right breed here? Add it to your [Kennel Profile](#).

MAIN REGISTRATION ORGANIZATION

Internationaler Hundefreunde aller Rassen (IHR)

REGISTRATION #

Numéro de pedigree commençant par 'IHR']

DATE OF BIRTH, KNOWN OR ESTIMATED (OPTIONAL)

Select: Day Month Year

If you don't know the exact birthdate, you can just enter the year, or the nearest year and month.

LOCATION (OPTIONAL)

This information will help us to highlight other Embark dogs that may be of interest to you.

Where does this dog currently live? 

Lieu où vous vivez

This location is a: Home Breeder Shelter Other

Please choose Home, Breeder, Shelter or Other

Where did you get your dog from? 

Lieu où vous avez acheté votre chien

This location is a: Home Breeder Shelter Other

Please choose Home, Breeder, Shelter or Other

Where was your dog born? 

Lieu où votre chien est né

This location is a: Home Breeder Shelter Other

Please choose Home, Breeder, Shelter or Other



[< BACK](#) [CONTINUE >](#)

Race : pour Embark, l'Altdeutscher Schäferhund et le Berger Blanc Suisse et le Berger Allemand sont des "German Shepherd Dogs"

Date de naissance de votre chien

neutered : stérilisé
not neutered : non stérilisé

L'organisme d'enregistrement de vos pedigrees (ex : IHR)

Une fois le profil de votre chien créé, dans la partie « Details » cliquez sur « Edit »

< ABOUT

Profile Photo

REMOVE PHOTO



ADD NEW PHOTO CHOOSE FROM GALLERY

Name and Story

EDIT

Pedigree Name

Call Name

Story

Current Link to Public Profile

Details

EDIT

Sex	, Not Neutered
Date of Birth	/ /
Supplied Breed	German Shepherd Dog
Main Registration Organization	Internationaler Hundefreunde aller Rassen (IHR)
Registration Number	IHR

EDIT DETAILS

SEX

MALE FEMALE

IS SIRIÛS ALREADY NEUTERED OR EXPECTED TO BE NEUTERED?

NOT NEUTERED NEUTERED

DATE OF BIRTH, KNOWN OR ESTIMATED (OPTIONAL)

Known [] [] [] []

If you don't know the exact birthdate, you can just enter the year, or the nearest year and month.

BREED

German Shepherd Dog

Don't see the right breed here? Add it to your [Kennel Profile](#).

MAIN REGISTRATION ORGANIZATION (OPTIONAL)

Internationaler Hundefreunde aller Rassen (IHR)

REGISTRATION # (OPTIONAL)

IHR

MICROCHIP # (OPTIONAL)

Enter microchip #

CANCEL SAVE

Renseignez le numéro de pedigree de votre chien **REGISTRATION #** (commençant par IHR s'il s'agit d'un pedigree Internationaler Hundefreunde aller Rassen) ainsi que son numéro d'identification (puce électronique) **MICROCHIP #**


Il est très important de renseigner ces informations afin qu'elles apparaissent sur le PDF des résultats de santé de votre animal.

Activer votre Kit de prélèvement


Vous recevez votre courrier Embark, à l'intérieur se trouve une enveloppe sur laquelle figure votre code d'activation à deux lettres et 8 chiffres.



Rendez vous sur votre profil Embark, vous y verrez apparaître les chiens auxquels vous avez créé un profil

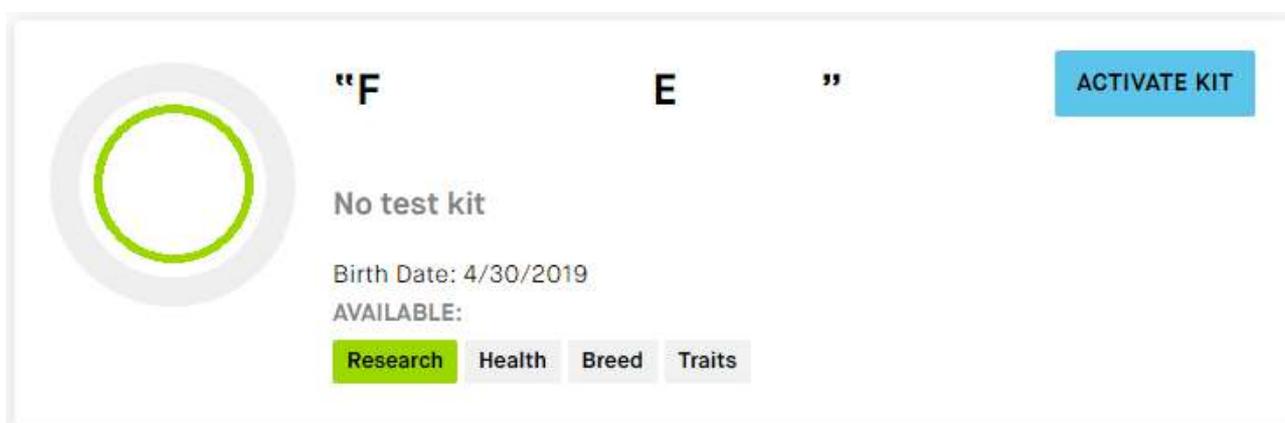

Cliquez sur « Activate Kit »

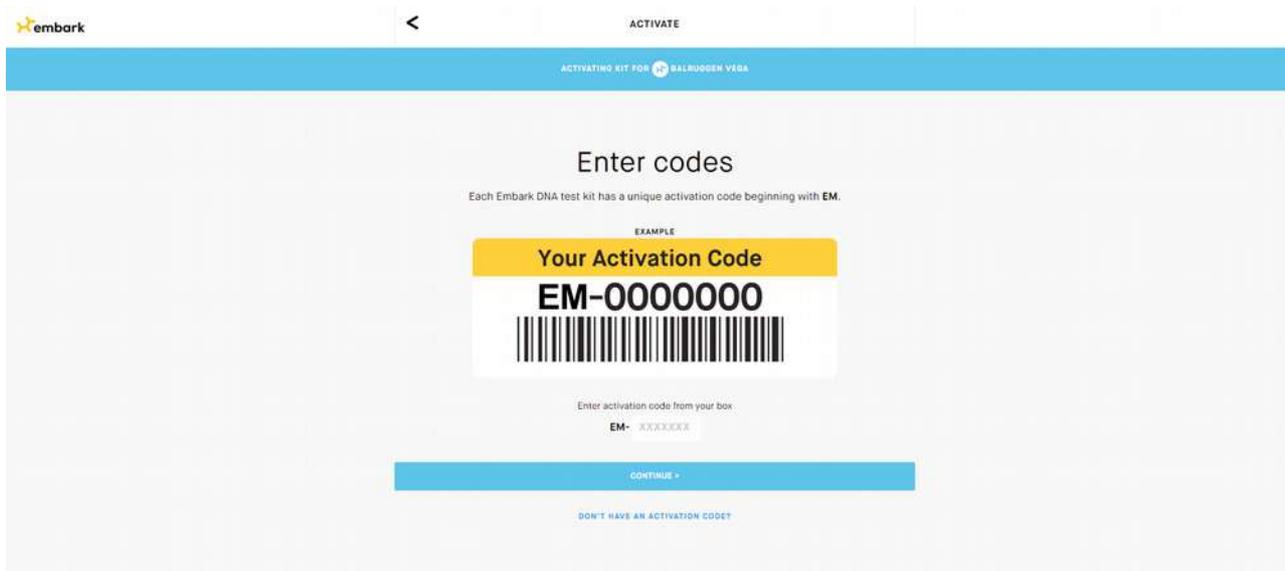

Entrez le code d'activation présent sur votre enveloppe Embark, **gardez le précieusement** de côté, il faudra également le noter sur le formulaire vétérinaire (Numéro de Kit).

Une nouvelle page apparaît « Kit activation is complete » :

embark

ACTIVATE

ACTIVATING KIT FOR BALRUGGER VEGA

Kit activation is complete

Kit details

SWAB TUBE NUMBER

S1020061506564

I want this dog's data to contribute to medical and scientific research

CONTINUE >

Need Help?

CONTACT US

Sur cette page, vous avez une suite de chiffre qui apparaissent. Il s'agit du numéro d'écouvillon (**SWAB TUBE NUMBER**), comparez le numéro présent sur votre écouvillon à celui qui apparaît à l'écran. Les deux doivent être identiques. **Gardez le précieusement** de côté, il faudra également le noter sur le formulaire vétérinaire (Numéro d'écouvillon).

Sur cette page apparaît une phrase (I want this dog's data to contribute to medical and scientific research) qui vous propose de permettre à Embark d'utiliser l'ADN de votre chien pour la recherche scientifique. Nous vous conseillons de la laisser cochée.

Sur la page suivante, Embark vous propose de vous avertir par SMS lorsque vos résultats sont prêts.

embark

ACTIVATE

ACTIVATING KIT FOR BALRUGGER VEGA

Text when ready?

When the results are ready we will notify you by email at lestloupdargoat@gmail.com

RECOMMENDED: You can also provide a mobile phone number to receive a text message when the results are ready:

06 52 19 99 17

CONTINUE >

L'opération d'activation sur le site de Embark est à présent effective.

Effectuer le prélèvement ADN

[Téléchargez le Formulaire d'Attestation Vétérinaire](#)

Rendez-vous dans votre bureau de poste, muni de votre enveloppe en plastique, dans laquelle vous aurez mis l'écouvillon, **sans la refermer**.



Demandez un affranchissement pour envoi aux états unis, assurez vous de ne pas couvrir l'étiquette « First Class Package Return Service »

Vous pouvez également coller l'étiquette d'affranchissement au dos s'il n'y a pas de place sur la face avant de l'enveloppe.



Rendez-vous chez votre vétérinaire, qui remplira avec vous le **Formulaire d'attestation vétérinaire** pour un test Embark.

Vous devez absolument renseigner toutes les informations sur ce formulaire afin que votre prélèvement soit reconnu par le club de race.

Remplissez le formulaire avec votre vétérinaire :

Vous trouverez le **numéro d'écouvillon** à 14 chiffres sur l'écouvillon de prélèvement



Vous trouverez le **numéro de Kit** sur votre enveloppe Embark, il s'agit de votre code d'activation



Votre vétérinaire vérifie la puce d'identification de votre animal. Une fois le formulaire rempli, vous le garderez de côté pour le fournir à l'UCFAS en même temps que les résultats de santé de votre chien.

Votre vétérinaire effectue le prélèvement dans la gueule de votre chien en suivant les instructions fournies puis replace l'écouvillon dans son sachet après l'avoir refermé, bien vissé et secoué pendant 30 à 60 secondes. Le sachet contenant l'écouvillon sera placé à l'intérieur de l'enveloppe que vous pourrez fermer.

Ne reste plus qu'à envoyer le prélèvement

Le résultat met plusieurs semaines à vous être envoyé.

Transmettre les résultats de votre chien à l'UCFAS

Vos résultats sont arrivés, vous pourrez les consulter, les partager et choisir ce que vous voudrez rendre publique ou non.

Afin de transmettre les résultats de votre chien au club de race UCFAS, il faut vous rendre sur votre Page personnelle <https://my.embarkvet.com/members> et cliquer sur le profil de votre chien. Une fois les résultats reçus, votre chien sera entouré d'un cercle de couleur(s)



En bas de page, vous trouverez un encadré « **Print or Download Results** »



Print or Download Results

CERTIFICATE

Suitable for framing >

FULL REPORT

Detailed results report >

VETERINARY REPORT

Send to your veterinarian >

OFA SUBMISSION REPORT

Send to the OFA >

You will first see an online preview; then click 'Download / Print' in the top-right to download a PDF file that you can either print out and mail to the OFA, or submit electronically via email to the OFA.

Important: Your submission will need to include payment to the OFA, and a completed [OFA DNA application form](#). At the top of the application, please be sure to write which tests you want to register with the OFA.

RAW DATA

Download raw DNA data >

Cliquez sur « **Full Report** »

Un PDF s'affiche, avec la photo de votre chien (si vous en avez chargé une), son nom complet et nom d'usage, le numéro de Kit et le numéro d'écouvillon :

“ ”

DNA Test Report Test Date: embk.me/

GENETIC STATS

Predicted adult weight:

Based on the date of birth you provided

TEST DETAILS

Kit number: EM- [redacted]
Swab number: [redacted]

Registration: Internationaler Hundefreunde aller Rassen (IHR) [redacted]  Microchip: [redacted]

Assurez vous que les numéro de puce et de pedigree sont corrects. S'il y a une erreur, vous pouvez aller la corriger en cliquant sur « Edit Profile » et en suivant les étapes de la page 4 de ce document.

Téléchargez ce PDF et faites le parvenir par mail à l'UCFAS accompagné du **[formulaire d'attestation vétérinaire](#)**.

comelevage@ucfas.fr